



## Cellules à numération LMR® à double quadrillage

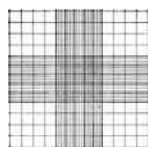

Neubauer

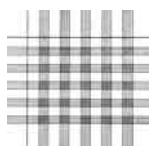


Malassez



Nageotte




### Cellules standard

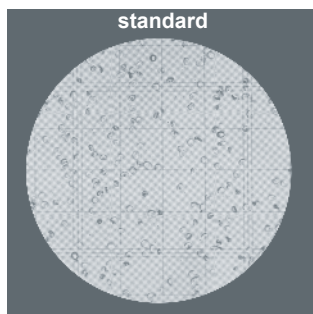

**cellules standard**  
double quadrillage, en coffret plastique, avec 2 lamelles  
optiquement planes sur les deux faces à  $\pm 0,001$  mm

référence	Prix HT
MALASSEZST	
NEUBAUERST	
THOMAST	
BURKERST	
NAGEOTTEST	

### Cellules à lignes claires pour un meilleur contraste

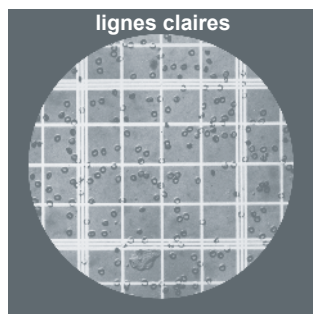

- cellules à numération LMR® à lignes claires : la partie centrale de la cellule est recouverte d'un film métallique semi-transparent, les lignes de quadrillage apparaissent claires, illuminées sur fond gris ; le contraste optique entre quadrillage et globules est excellent et les globules sanguins sont ainsi très nettement définis sur le quadrillage, la mise au point du microscope est beaucoup plus facile

**cellules à lignes claires**  
double quadrillage, en coffret plastique avec 2 lamelles  
optiquement planes sur les deux faces à  $\pm 0,001$  mm

référence	Prix HT
MALASSEZLC	sur demande
NEUBAUERLC	
THOMALC	
BURKERLC	
NAGEOTTELC	

## Plaques pour groupes sanguins



- détermination rapide des groupes sanguins étudiés
- polystyrène haute transparence
- marquage alphanumérique
- 10 puits

référence **Prix HT**  
AX1915 Plaques groupes sanguins, les 100

## Anticoagulant prêt à l'emploi

- conserve intacts les éléments cellulaires du sang beaucoup mieux et plus longtemps que les oxalates et l'héparine
- parfaitement indiqué pour la numération des plaquettes, empêche efficacement l'agglutination des plaquettes in vitro et permet ainsi leur numération dans du sang veineux envoyé au laboratoire
- le taux de sédimentation, le taux d'hématocrite, les facteurs Rh et les caractéristiques du sang sont considérablement moins modifiés qu'avec les oxalates
- remplace efficacement les oxalates pour la chimie du sang total
- en flacons polyéthylène compte-gouttes
- un flacon contient la quantité pour environ 850 échantillons de 5 ml de sang
- à base d'EDTA (sel dipotassique)



référence **Prix HT**  
LMR5050 anticoagulant prêt à l'emploi,  
le flacon de 40 ml