


## Combiné réfrigérateur / congélateur ménager 261 litres



Partie réfrigérateur  
avec grilles en acier plastifié

Partie congélateur  
avec tiroirs transparents sur tablettes en verre

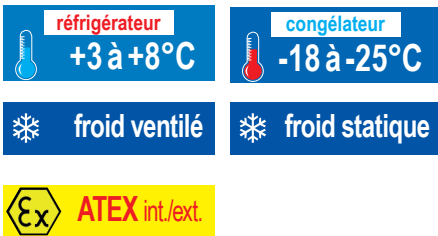

- température réglable : réfrigérateur de +3 à +16°C congélateur de -9 à -30°C
- précisions indicatives (non garanties) :  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  à +5°C,  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  à -25°C
- classe ATEX : Ex II3/- G Ex ec IICT6Gc
- régulation de la température par écran tactile digital
- verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme "Bonne Pratique de Laboratoire"
- 2 circuits de froid indépendants avec commandes de température séparées
- refroidissement ventilé (réfrigérateur) et statique (congélateur)
- dégivrage et évaporation des condensats automatique sur réfrigérateur et manuel sur congélateur
- carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis
- isolation polyuréthane haute densité épaisseur 45mm (réfrigérateur) et 70mm

- (congélateur) injectée sans HFC
- portes avec serrure et sens d'ouverture réversible.
- arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- rappel des portes automatique, poignées à dépression
- passage de cuve  $\varnothing$  15mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes
- passage de cuve  $\varnothing$  30mm pour la qualification sur site
- alarme température haute/basse visuelle et sonore
- alarme ouverture de porte visuelle et sonore
- contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- sauvegarde de la température min. et max.
- thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C (réfrigérateur)
- grilles renforcées en acier plastifié charge max 40kg (réfrigérateur), et de tiroirs transparents sur tablettes verre charge max 24kg (congélateur)
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)

capacité utile		261 litres
<b>capacité utile réfrigérateur + congélateur</b>		<b>199 litres + 62 litres</b>
température (réfrigérateur / congélateur)		+3 à +16°C / -9 à -30°C
précision		$\pm 3^{\circ}\text{C}$ à +5°C $\pm 5^{\circ}\text{C}$ à -25°C
refroidissement réfrigérateur / congélateur		ventilé / statique
puissance - consommation		170 W - 390 kWh/an
équipement	réfrigérateur	5 grilles en acier plastifié
	congélateur	3 tiroirs
poids		83 kg
dim. externes (lxpxh)	réfrigérateur	460 x 422 x h1037mm
	congélateur	406 x 292 x h614mm
	total	600 x 654 x h2044mm
références LIEBHERR		LCV4040
Combiné réfrigérateur / congélateur		RR4040